

Analizador de Humedad MA 50.R.WH

El Analizador de Humedad MA 50.R.WH es un equipo diseñado para la determinación rápida y precisa del contenido de humedad en muestras de laboratorio y control de calidad. Utiliza calentador de halógeno y ofrece distintos perfiles de secado, permitiendo adaptar el análisis según el tipo de muestra.

Cuenta con pantalla LCD de 5,3" con retroiluminación, conectividad RS232, USB-A, USB-B y Wi-Fi, y funciones útiles para trazabilidad como identificación de muestra. Su diseño compacto y robusto, con protección IP43, lo hace ideal para entornos de laboratorio exigentes.

Es una excelente opción para aplicaciones en industrias alimentaria, química, farmacéutica, cosmética y control de materias primas, donde se requiere un análisis de humedad confiable y repetible.



SKU: WL-305-0005




Característica	Especificación
Modo de visualización	%D, %M, %R, g
Modo de secado	4 perfiles: estándar, rápido, escalonado, suave
Opciones de terminación de secado	4 modos: temporal, definido, automático, manual
Funciones adicionales	Identificación de la muestra

Parámetros metrológicos

Característica	Especificación
Capacidad máxima [Max]	50 g
Legibilidad [d]	1 mg
Rango de tara	-50 g
Calibración	Externa
Masa máxima de prueba	50 g
Elemento de calentamiento	Calentador de halógeno
Repetibilidad de humedad	±0,05 % (muestra ~2 g), ±0,01 % (muestra ~10 g)
Exactitud de lectura de humedad	0,001%
Rango de temperatura de secado	Máx. 250 °C

Parámetros físicos

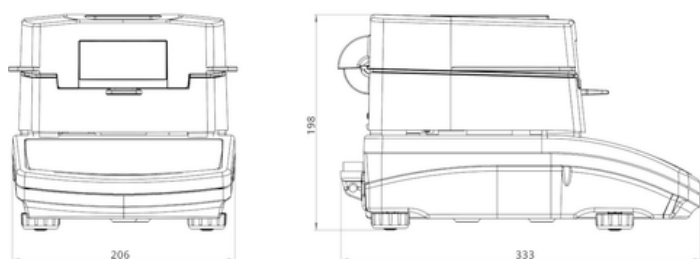

Característica	Especificación
Sistema de nivelación	Manual
Pantalla	LCD 5,3" (con retroiluminación)
Altura máxima de la muestra analizada	20 mm
Dimensión de platillo	Ø90 mm, h = 8 mm
Dimensiones de embalaje (An x Pr x Al)	476 × 381 × 346 mm
Masa neta	4,8 kg
Masa bruta	6 kg